

FRED easy – Silent-Mode


Um Ihnen bei vital stabilen Patienten eine EKG-Kontrolle ohne störende Sprachansagen zu ermöglichen, lässt sich der FRED easy Professional in einen Silent-Mode umschalten.

Der Einsatz kann speziell an Orten erfolgen, wo eine schnelle Überführung in eine Klinik nicht gewährleistet ist.

Im Fall einer lebensbedrohlichen Rhythmusänderung reaktiviert das Gerät automatisch den AED-Modus und der Anwender wird aufgefordert, den Patienten zu überprüfen.



Nach der ersten Analyse können Sie zu jeder Zeit den Silent-Mode durch einfachen Tastendruck aktivieren. Sobald Sie in den AED-Modus zurück wechseln, wird automatisch eine neue Analyse des Patienten-EKG eingeleitet.

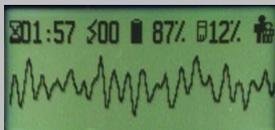

Im Silent-Mode überwacht der FRED easy permanent im Hintergrund das Patienten-EKG. Bei lebensbedrohlichen Rhythmusänderungen wird der Anwender gewarnt und das Gerät schaltet unverzüglich zurück in den AED-Modus.



Im Silent-Mode ermöglicht Ihnen die leistungsstarke Langzeit-Batterie des FRED easy einen Dauerbetrieb von bis zu 6.5 Stunden. Während der gesamten Einsatzzeit wird das EKG des Patienten aufgezeichnet und steht zu Dokumentationszwecken zur Verfügung.

Ärzte, Rettungsdienst, Ambulanz und Feuerwehr - mit SCHILLER haben Sie stets einen erfahrenen Partner, der Ihre Bedürfnisse kompetent und zuverlässig umsetzt



FRED easy mit Silent-Mode

Übrigens: Der Silent-Mode kann jederzeit durch unsere Service-Techniker kostengünstig auch bei Ihrem FRED easy nachgerüstet werden. Sprechen Sie uns einfach an!

